




PETEKLİ HAVALI YATAK VE BASINÇ POMPASI KULLANIM KILAVUZU

YATAK YARASI KARŞITI
MODEL NO : HF62012

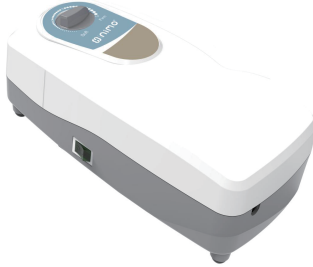

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren başlar ve (1) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 gündür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcı, bati acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı hatayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, -
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonun mevcut olmaması halinde sırasıyla, satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Çalışma Esasları

- Yeterli bir ritimde hava, doku muhtemel hipoksisine sebep olması uzun süreli vasküler kompresyonu önler.
- Havalı yatak hastalara ve pozisyonlarına göre kendini uyum sağlar.

Kullanım Yönergeleri

Geleneksel olarak kabul edilen basınç ağrısı kontrol yöntemi, müşteriye düzenli aralıklarla döndürmek ve riskli alanları düzenli olarak gözlemlemektir.

Havalı yatak, tedaviye desteklemesi amaçlamaktadır, hastanın gözlemlenmesi ve gerektiğinde dönmesi durumunda tedavinin bir parçası olarak düşünülmelidir.

Genel

- Günde 15 saatten fazla yatakta zaman geçiren hastalar için.
- Orta ila yüksek ülse olma riski altında hastalar için.

Kurulum / Kullanım

1. Yatağı açınız.
2. Yatağa yerleştirin.
3. Yatağa sabitleyin.
4. Kompresörü (pompa) kancayı kullanarak yatağın ucuna (ayak ucuna) asın.
5. Yatak besleme borularını uygun çıkışları eşleştirerek kompresör (pompa) konektörüne bağlayın.
6. Elektrik güç kaynağı kablosunu kompresöre (pompa) bağlayın.
7. Yatak boyunca yatak fişi soketine yönlendirin ve takın.
8. Kompresörü (pompa) açmak için düğmeye basın.
9. Hastayı yatağa yerleştirmeden önce, yatağın tamamen şişmesini bekleyin.
10. Hastanın morfolojisine karşılık gelen basıncı seçin.

Güvenlik Önlemleri

- Bu elektrikli ekipmanı kullanırken DİKKAT EDİN.
- Kullanmadığınızda elektrik kaynağına bağlı BIRAKMAYIN.
- Ekipmanı aşırı neme maruz BIRAKMAYIN.
- Endüstriyel yağ çözücüler veya asetik çözücüler gibi aşındırıcı temizlik ürünleri KULLANMAYIN.
- Elektrik kaynağına bağlıyken bu ekipmanı yerini değiştirmeye ÇALIŞMAYIN.

Temizlik / Dezenfeksiyon

Kompresör (Pompa):

- Temizlemeye başlamadan önce elektrik kaynağından ayırdığınıza EMİN OLUN.
- Hafif bir deterjan çözeltisi ile emdirilmiş bir bez kullanmaya DİKKAT EDİN.
- Üreticinin çözüm konsantrasyonların tavsiyesini uyduğunuza EMİN OLUN.
- Temizleme solüsyonu ile silmeden önce üreticinin önerilerini aşmamaya özen gösterin.

CE işaretli deterjan veya yüzey temizleyici malzemesi ile üretici tarafından önerilen konsantrasyonlar dayanıklılık sürelerini takip ederek kullanın.

Bakım

Kompresör (pompa) bakım işlemleri kesinlikle ithalatçı tarafından yetkilendirilmiş ve eğitilmiş bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir .

Saklama ve Taşıma Koşulları

Sıcaklık: 10 °C ila 40 °C
Nem: %10 ila %95 bağıl nem
Basınç yüksekliği: 86-106kpa

Çalışma Ortam Koşulları

Sıcaklık: 10 °C ila 40 °C
Nem: %10 ila %95 bağıl nem
Basınç yüksekliği: 86-106kpa

Havalı Yatak Özellikleri

Özellikler:

Maks. Kullanıcı Ağırlığı : 130 Kilogram

Yatak Ölçüleri : 200 * 90 cm

Hammadde : PVC 0.3mm

Kompresör (Pompa) Özellikleri

Özellikler:

Devir süresi : 12 dk.

Hava Çıkışı : 5-7 L/ dk.

Basınç Aralığı : 50 ~ 110 mmHg

Elektrik Güç Kaynağı : 220-240 VAC

Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıf II

Garanti süresi : 12 Ay

İthalatçı:

Hünkar Ecza ve Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akçeşme Mah. 2019 Sk. No:5 Merkezefendi Denizli/ TÜRKİYE
+90 258 371 46 56
www.hunkarmedikal.com

Üretici:

Foshan HongFeng Co., Ltd No. 4-2, Leqiang Road, Leping Town,
Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China

Yetkili Avrupa Temsilcisi:

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10 48163 Muenster Germany



KORE TEKNOLOJİSİ

KLVS_HF62012/00/23.05.2024

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Hünkar Ecza ve Medikal Ltd.Şti

Adresi: Akçeşme Malı. 2019 Sok No:5 Merkezefendi/Denizli/

TÜRKİYE Telefon: +902583714656

Fax:+902583720681

Web: www.hunkarmedikal.com

Firma Yetkilisinin:

İmzası ve Kaşesi:

**Malın:**

Cinsi: PETEKLİ HAVALI YATAK VE BASINÇ POMPASI

Markası: NİMO

Modeli: HF62012

Bandrol ve Seri no:

Teslim tarihi ve yeri:

Azami tamir Süresi:30 İş Günü

Garanti Süresi: 1 Yıl

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel-Fax:

Fatura Tarihi ve No:

Tarih-İmza-Kaşe: