

# ELEKTRONİK TEKLİ GÖÇÜS POMPASI

MODEL NO: HNK-SUTPUMP-01

YERLİ  
ÜRETİM



Hnimo®

NİMO® Elektronik Tekli Göğüs Pompası ergonomik ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bebeğin emiş ritimlerini taklit eden biyonik ritim ve klasik sabit ritim olmak üzere iki farklı emiş moduna sahiptir. Cihaz annenin süt akışını başlatmaya yardımcı, düşük seviyeli modda çalışmaya başlar. Her iki modun 4 kademeli emiş seviyesi ile süt sağımının en uygun ritmini anne seçebilir.

Sahip olduğu led göstergeler sayesinde hangi emiş modunda ve hangi emiş gücünde olduğu kolaylıkla görülebilir.

Elektrik bağlantısının yanında 4 adet AA pil ile kullanılabilmesi sayesinde seyahatte, elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde de kullanılabilir.

# Bebeğinizin her zaman en iyi şekilde beslensin

Adaptörlü  
veya pilli  
sağım

Emişi taklit  
eden biyonik  
ritim

Ağrısız,  
rahat kullanım

4 farklı  
emme gücü  
seviyesi ve  
8 farklı ritim  
seçeneği

Manuel  
kullanıma  
olanak veren  
huni tasarımı

Basit kullanıcı  
paneli ile  
kolay kullanım

150 ml  
biberon  
kapasitesi

30 dk. sonra  
otomatik  
olarak  
kapanma

Sessiz ve  
titreşimsiz  
çalışma

## Bebeğiniz İçin Süt Deponuzu Oluşturun



Göğüslerinizin dolu ve rahatsız hissettirdiği ancak bebeğinizin emmeye henüz hazır olmadığı zamanlarda Nimo<sup>®</sup> Elektronik Tekli Göğüs Pompası kullanarak kendinizi yormadan hem rahatlayın hem de sütünüz biriksinsin

## Annelerin En B y k Yardımcısı



S t n z az diye dert etmeyin. Bebeđinizi emzirdikten sonra s t n z  sađın s t n z n artmasını sađlayın.

## Ayarlanabilir Vakum İle Konforlu Kullanım



Kullanıcı panelinden istediğin modu ve vakum seviyesini ayarla Nimo® Elektronik Tekli Göğüs Pompası kullanmanın keyfini yaşa.




## Yumuşak Silikon Göğüs Yastığı

Özel tasarım göğüs yastığı  
sağım yaparken masaj  
yapma özelliği ile süt  
akımını kolaylaştırır.

## Adaptörlü veya Pilli Sağım Yapabilme

Seyahatlerde veya elektriğin  
olmadığı alanlarda pil ile  
rahatlıkla sağım yapabilirsiniz.

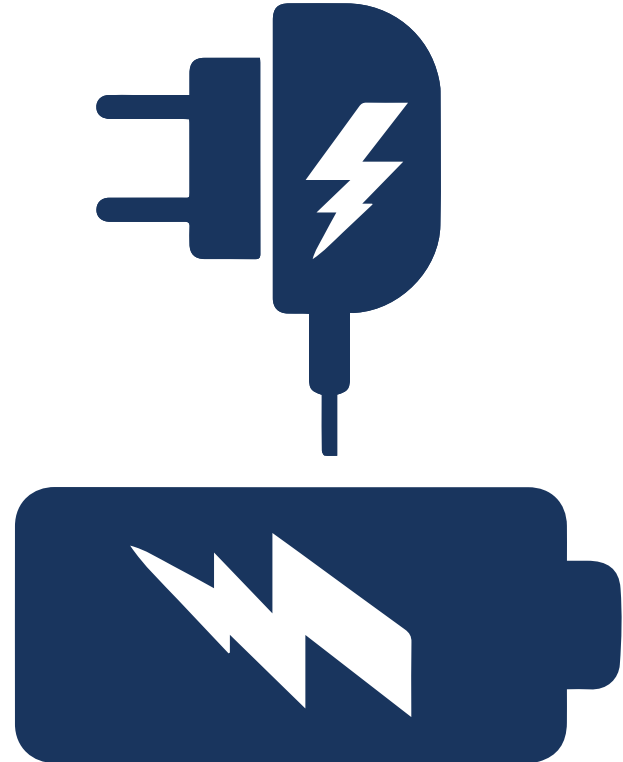



**%0 BPA**

NIMO® Göğüs Pompası  
BPA içermeyen  
malzemelerden  
üretilmiştir.

Nimo® Elektronik Tekli Göğüs Pompası dik pozisyonda otururken emişi kolaylaştıracak eğimli huni tasarımına ve göğsünüze rahatlık verecek göğüs yastığına sahiptir. Sağılan sütün geri hortuma ve pompaya kaçmasını engelleyen silikon diyaframı vardır.

Sütün değdiği, huni, göğüs yastığı, silikon diyafram, silikon valf ve biberon bulaşık makinesinde yıkanabilir.



## TEKNİK ÖZELLİKLER


Max. Vakum	160 mmHg
Güç	6W-DC 6V 1A veya (4x1.5 AA Alkaline Pil) (Piller Ambalaja Dahil Değildir !)
Adaptör	Giriş: 100-240V AC ~50/60Hz Çıkış: DC 6V 1A
Otomatik Kapanma Süresi	30 dk
Boyutlar	105mm(Boy) x 100mm(En) x 60mm(Yükseklik)
Ağırlık	225 gr (Pilsiz)




**Yeni Nesil Teknoloji**  
New Generation Technology



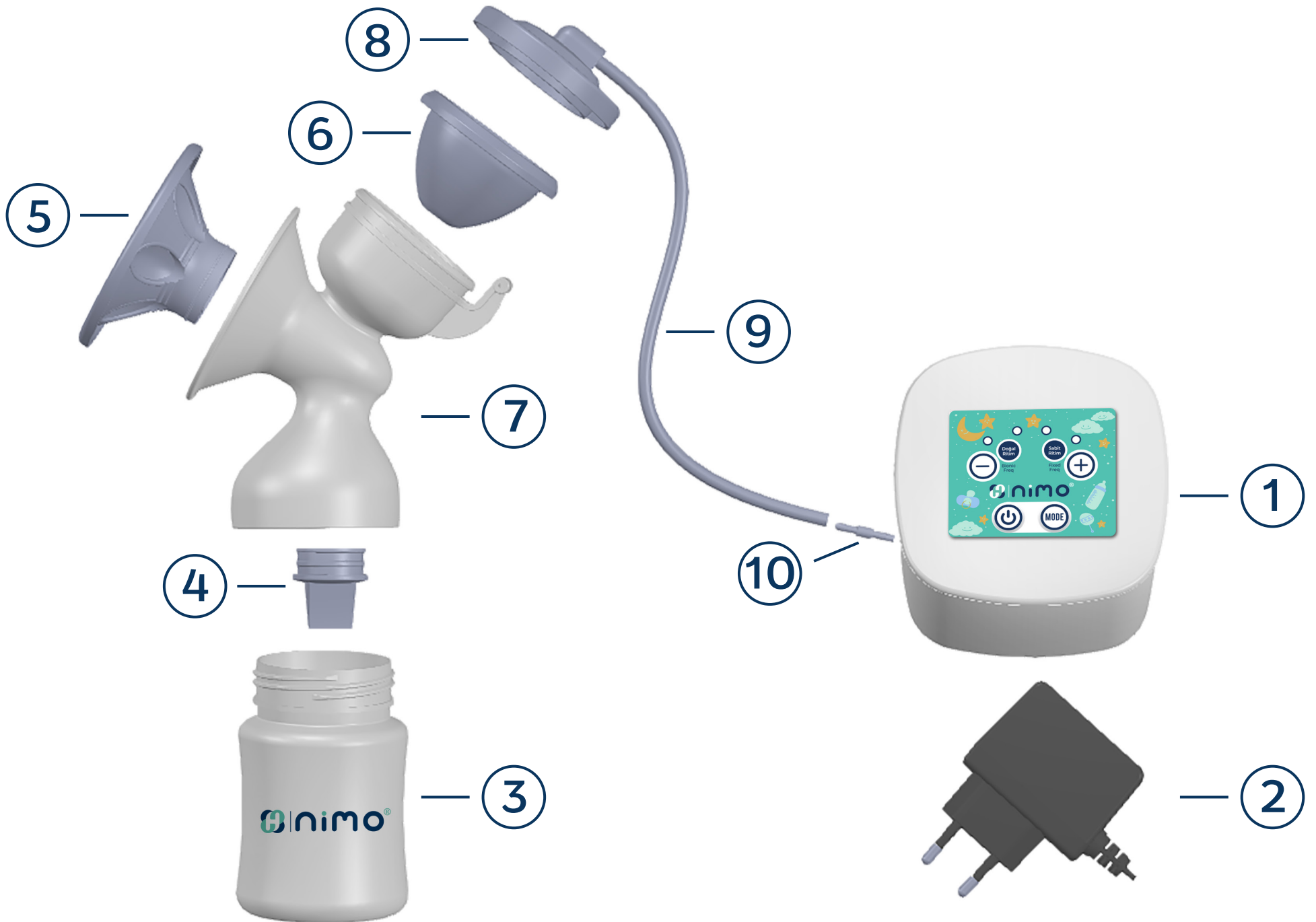

- 1) Kontrol ve Motor Ünitesi
- 2) AC/DC Adaptör
- 3) Biberon
- 4) Tek yönlü süt valfi
- 5) Silikon göğüs yastığı

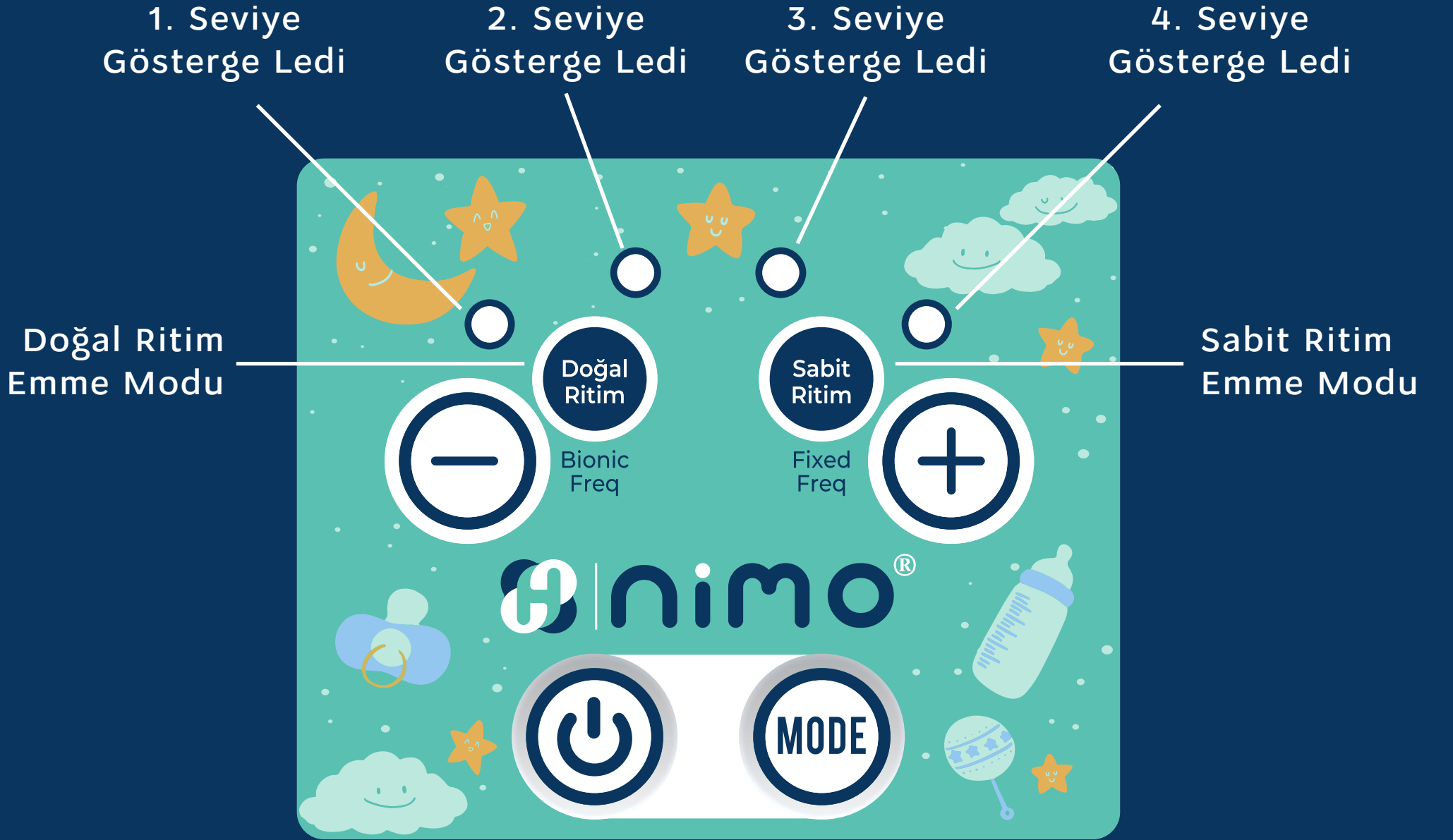- 6) Silikon emme diyaframı
- 7) Pompa gövdesi
- 8) Huni kapağı
- 9) Hava hortumu
- 10) Hava hortumu-motor ünitesi bağlantı rekoru





## Tuş Özellikleri

Tuş	Fonksiyon
	Cihaz Açma ve Kapatma
	Sağım Modunu Değiştirme
	Vakum Seviyesini Artırma
	Vakum Seviyesini Azaltma



EN 14350



**2 YIL GARANTİ**



## KUTU İÇERİĞİ

1 Adet  
DC/AC  
Adaptör

1 Adet  
Elektronik  
Tekli Göğüs  
Pompası

1 Adet  
Biberon ve  
Emziği

1 Adet  
Yedek  
Emiş Valfi

1 Adet  
Kullanım  
Klavuzu

1 Adet  
Garanti  
Belgesi